


## **JY-SPFT**

# **CELDA ELECTROFORESIS HORIZONTAL**

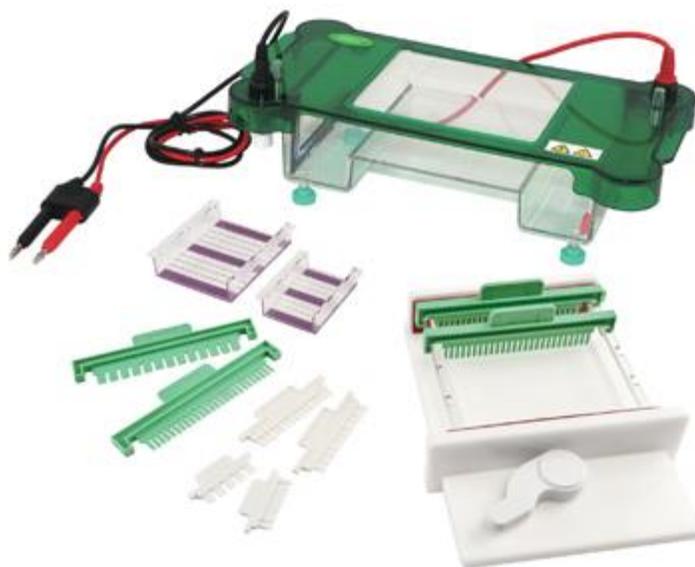

### **Descripción**

#### **Especificaciones técnicas:**

Tamaño del gel (W x L) : 130 x 130 mm; 78 x 100 mm; 48 x 75mm.

Volumen de la muestra: 3, 5, 10, 15, 13, 26.

Volumen del búfer: ~ 600ml.

Dimensión (L x W x H: 305 x 152 x 80 (mm

Peso neto: 1.7 (kg)

#### **Característica distintiva**

El abundante tampón no solo garantiza efectos de enfriamiento sino que también mantiene estable el valor de pH durante todo el proceso del experimento.

Los electrodos desplegados hacen que la reparación y el reemplazo de piezas sea fácil y rápido.

Con la regla fluorescente en la bandeja, puede observarse directamente en el ultravioleta.

Con una fundición de gel especial, que evita la fuga de gel, la operación es simple y conveniente.

La tapa superior transparente evita de manera efectiva que el líquido en la celda se volatilice y evita las fugas de electricidad.

**Tel: (4) 217 57 51**  
**(4) 239 93 75**  
**Cel: (57) 301 424 5380**  
**Cr 91 N° 70 A 32**  
**Bogotá - Colombia**

**Tel: (507) 341 05 95**  
**Cel: (507) 61 01 40 14**  
**Urbanización Arboledas**  
**Cluster Los Alamos**  
**calle 8, Panamá Oeste**

**Email: [info@myminstrumentostecnicos.com](mailto:info@myminstrumentostecnicos.com)**

Apagado automático cuando se retira la tapa. Tamaño del gel (W × L) : 130 × 130 mm; 78 × 100 mm; 48 × 75mm.

Volumen de la muestra: 3, 5, 10, 15, 13, 26.

Volumen del búfer: ~ 600ml.

Dimensión (L × W × H: 305 × 152 × 80 (mm

Peso neto: 1.7 (kg)